

ポケママ 2 操作マニュアル【Android】

アプリインストール

まず右の QR コードを読み込んで、ご自身の Android 端末にポケママ 2 専用アプリ「WirelessUSG.Z」をインストールしてください。

QR コードを使ってインストールする以外に、Android 端末の Google Play で検索し、専用アプリをインストールすることも可能です。



エコー（ポケママ 2 機器本体）各部位の説明

① 電源オン / オフ & ライブ / フリーズボタン

② バッテリー容量が表示されます。

③ ワイヤレス接続の状態が表示されます。



ワイヤレス（Wi-Fi）接続方法

1. エコー（ポケママ 2 機器本体）の電源入れる

電源を入れるときは、オン/オフボタン①を押してください。電源が入ると、バッテリー容量②とワイヤレス接続の状態③が青く表示されます。

2. Wi-Fi 無線接続する

エコーとスマートフォン / タブレットなどの端末を、Wi-Fi 機能を使って接続してください。まずスマートフォン / タブレットの【設定】から Wi-Fi をオンにします。

3. ネットワークのリストからエコーの SSID を探します。「SS」から


はじまる SSID を選択します（SSID の下 3 桁はエコー本体に記載されているパスワードの下 3 桁と同じ数字です）。

Wi-Fi のパスワードは、エコー本体の背面に表記されているアルファベットと数字です。

4. Wi-Fi 接続完了後にアプリを起動し、ポケママ 2 メニューの

【Freeze（フリーズ）】ボタンを押してエコーのフリーズを解除


してください。フリーズを解除するとエコーの動画が映るようになります。

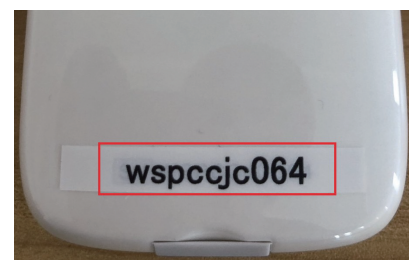

動画撮影の設定（撮影時間の延長）

ワイヤレス（Wi-Fi）接続が完了したら、ポケمام 2 専用アプリ「WirelessUSG.Z」を起動してください。

ポケمام 2 メニューの【Preset（設定）】ボタンを選択し、「Cine Loop（再生フレームレート）」を 100 から 1000 へ変更してください。

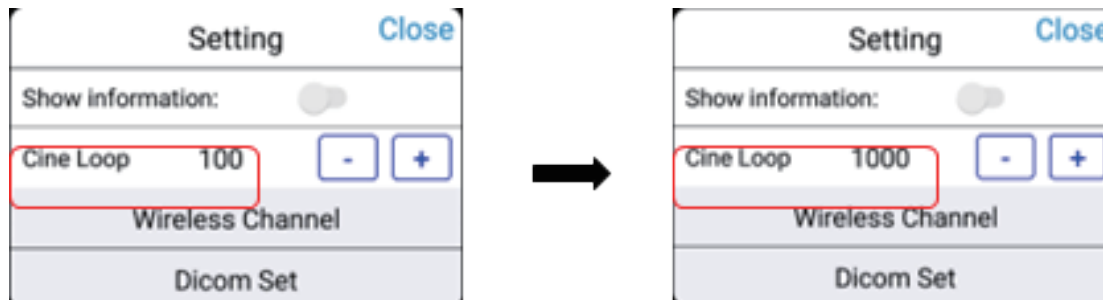

「Cine Loop」は「100」「200」「500」「1000」から選択できますが、かならず「1000」に設定してください。（初期設定では約 15 秒程度録画が可能です。「Cine Loop」を「1000」に設定すると約 120 秒から 180 秒の動画を録画できるようになります。）

写真 / 動画保存の設定（データの保存ができない場合のみ）

1. まず Android 端末の【設定】から、「アプリと通知」を選択します。
2. つぎに「アプリと通知」内の「アプリの権限」を選択します。
3. つぎに「アプリの権限」内の「カメラ」を選択します。
4. 最後に「カメラ」内のリストから専用アプリ「WirelessUSG.Z」を探し、カメラの権限がオンになっていることを確認してください。

動画の撮影 / 保存方法

1. 【Freeze（フリーズ）】ボタンをタップすると撮影が始まります。
2. もう一度【(Freeze フリーズ)】ボタンをタップすると撮影が停止します。
3. 【Save（動画の保存）】をタップすると Android 端末の（通常の動画や写真と同じ）フォルダに動画が保存されます。



動画撮影の最長時間は約 120 秒から 180 秒（2 分から 3 分程度）となります。モニター右下に表示されるフレーム数（0-1000※）が 1000 になると自動的に撮影が停止します。

インターフェース紹介



- ①Dyn. (ダイナミックレンジ)：画像のダイナミックレンジ / 露光範囲を調整します。
- ②Focus (フォーカス)：画像のフォーカスを調整します。
- ③Annote (コメント入力)：画像にコメントを入力します。
- ④Depth (深度)：深度の調節をします。
- ⑤Play (再生)：画像のフリーズ後にそれまでの動画をリコール再生します。
- ⑥Save (画像の保存)：スマートフォンやタブレットに画像を保存します。
- ⑦Save (動画の保存)：スマートフォンやタブレットに動画を保存します。
- ⑧Gain+ (ゲイン+)：画像のゲイン、露光や明るさを上げます。
- ⑨Gain- (ゲイン-)：画像のゲイン、露光や明るさを下げます。
- ⑩Freeze (フリーズ)：画像のフリーズ、フリーズ解除をします。
- ⑪Preset (設定)：動画の再生フレームレートや Wi-Fi チャンネルを選択します。基本的にチャンネルを変える必要はありません。

エコーの充電

電池残量が少ない場合、エコーの充電が必要になります。エコー先端のゴム栓を引き抜き、エコーと充電器を USB ケーブルで接続します。



充電中はバッテリー容量表示ランプが点滅します。グリッドは充電量を表しています。4つのグリッドライトが表示され、さらにライトが点滅していない場合、バッテリーが完全に充電されている状態であることを示しています。充電が完了したら、USB ケーブルを取り外し、液体などによる損傷を防ぐため、ゴム栓をエコーの端に差し込んでください。



クリーニング

エコーのクリーニングは、ウェットティッシュ等を使用して行ってください。

株式会社 BORDER (ボーダー)

ポケマムお客様相談係

〒108-0072 東京都港区白金 3-7-18-503

Mail: pokemam@borders.co.jp

WEB: <https://pockemam.com>